

セントラルアラート用
セルフォンセンサ
CA-CX

多機能型電話着信通報装置

取扱説明書



株式会社 自立コム


●はじめに

セルフォンセンサは、スマートフォン・携帯電話・固定電話のビデオ通話・音声通話・SMS（ショートメッセージサービス）の着信を、光・音・振動（別売りのベッドシェーカ使用時）で通知します。また、ペアリングされた CA-360J・CA-PX・CA-RX に対しても無線で通知します。


●安全に関するお願い

1. けがを防ぐため、子供の近くで使用するには、子供から目を離さないようお願いします。
2. 可動する部分や露出した金属面には触らないでください。
3. 部品類は推奨品もしくは製造元が販売しているものを使用してください。
4. 火災や感電の危険を避け、安全にお使いいただくため水のかかる場所で使用しないでください。
5. コンセントから電源プラグを抜く際には、コード部分ではなくプラグ部分を持って抜いてください。
6. 使用しない時やクリーニング時には、コンセントから電源プラグを抜いてください。
7. 落下や破損で故障した機器や、壊れた電源プラグやコードの被覆が破れた状態で操作をしないでください。
故障した場合は、購入した販売店もしくは株式会社自立コムまでご連絡ください。
8. 落雷の危険がある場合は、使用を控えてください。


●同梱内容

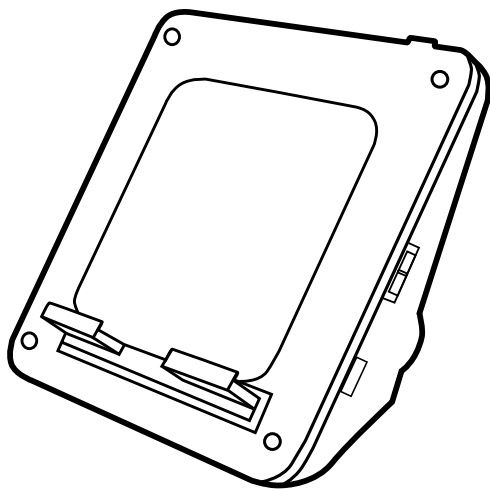

CA-CX 本体

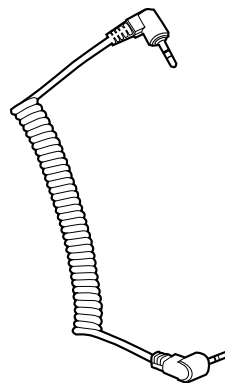


カール接続コード

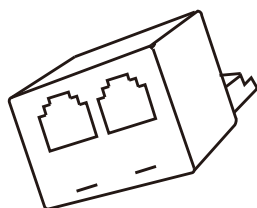


電話線分岐コネクタ




マニュアル

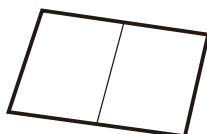

滑り止め


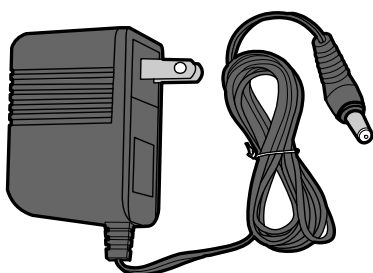


ACアダプタ

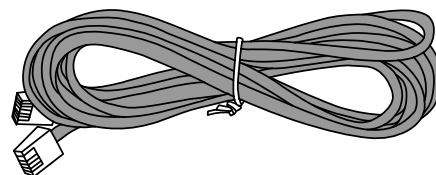

電話線 (2m)


●各部名称

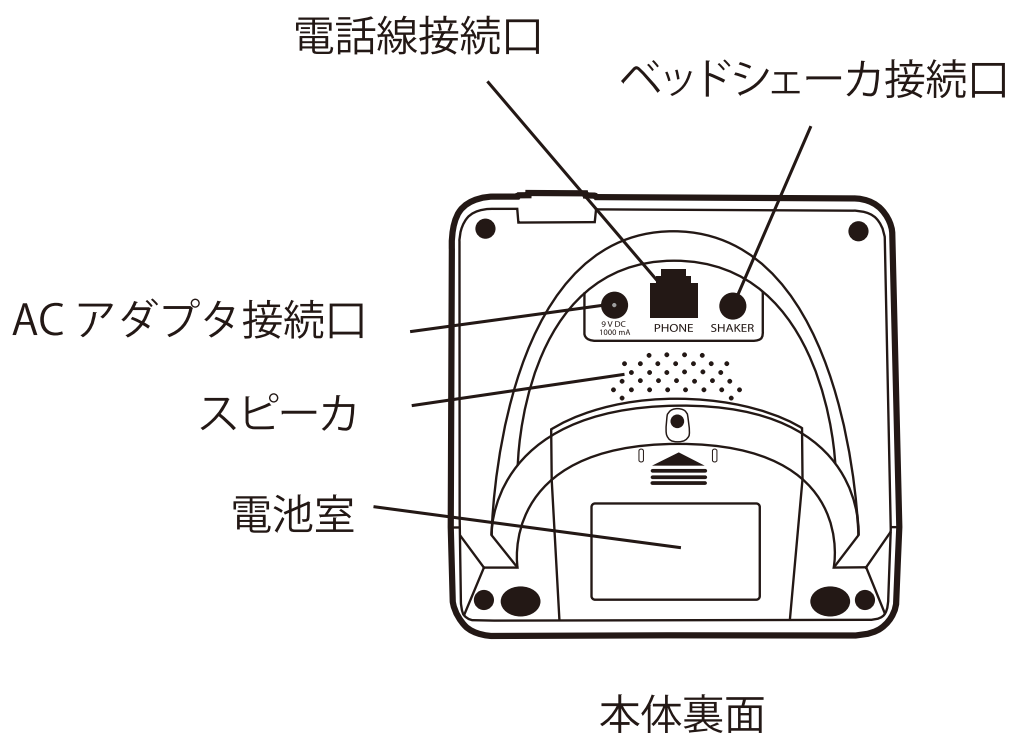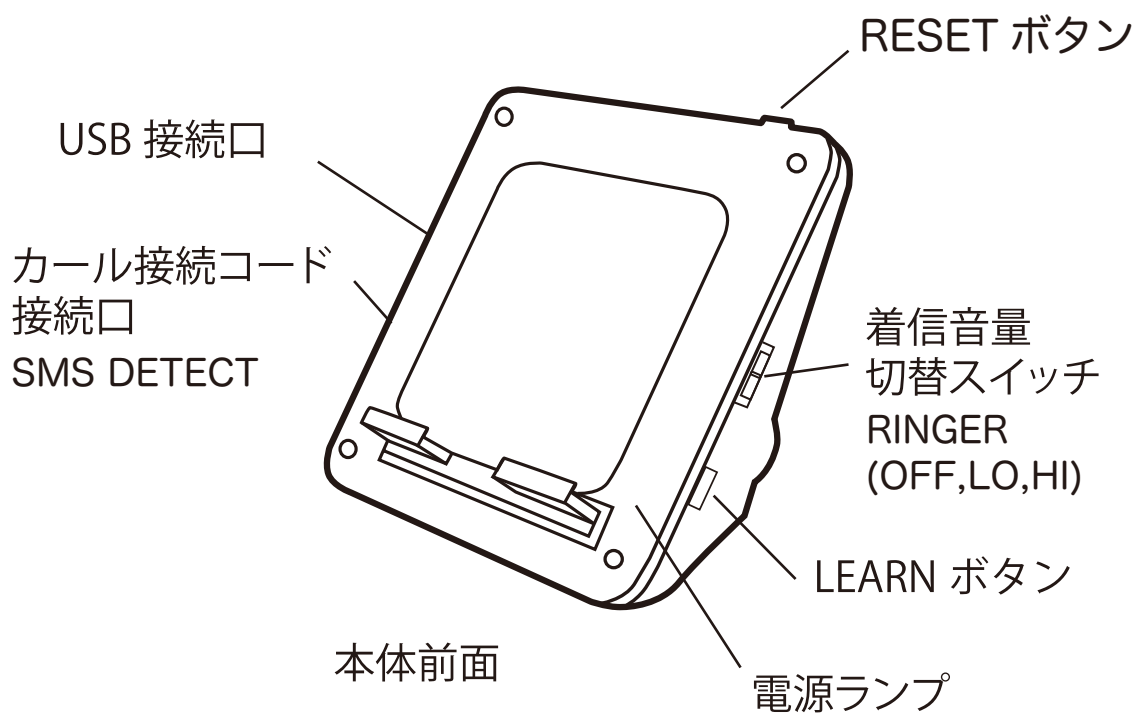

●接続方法

CA-CX はテーブルやカウンターなどの表面が平らな安定した場所に設置してください。洗濯機や乾燥機の上など振動が起こる場所には設置しないでください。

ベッドシェーカ
(BS100/ 別売)

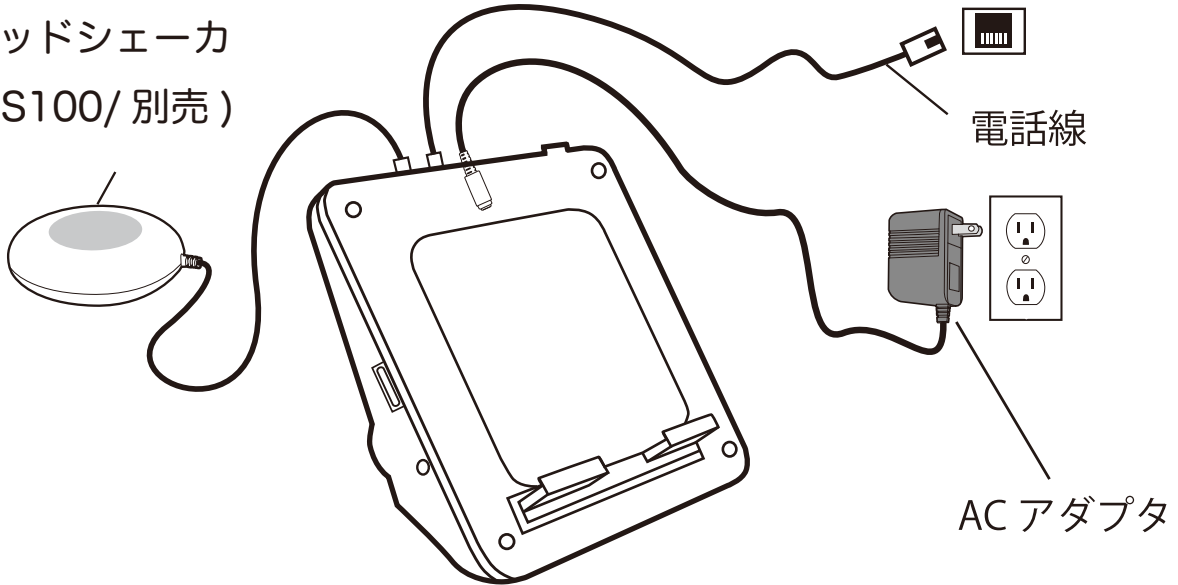


●バックアップ用電池の入れ方

CA-CX は停電時などの場合には4本のアルカリ単三電池 (別売) でも使用できます。

ネジを外します

単三アルカリ電池

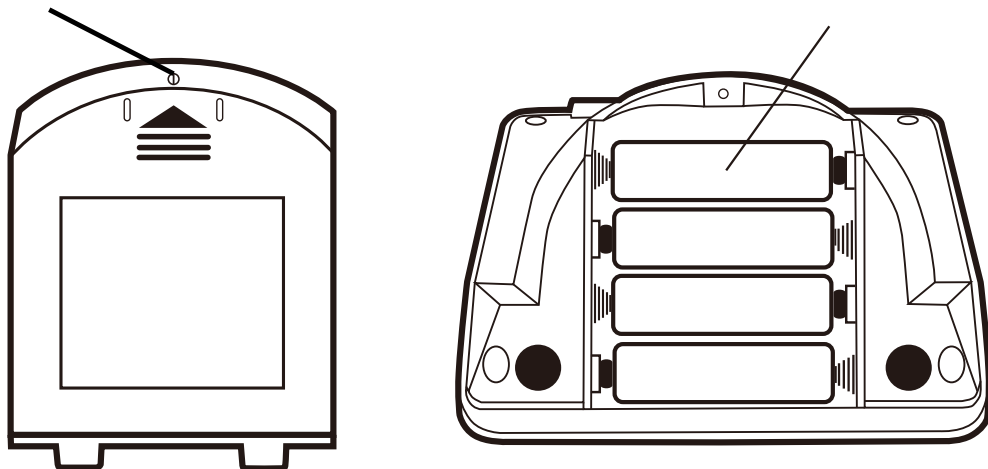

● 操作方法

親器 (CA-360J・CA-PX・CA-RX) とペアリング

1. CA-CX セルフォンセンサと親器 (CA-360J セントラルアラート、CA-PX ページャ受信器または CA-RX リモート受信器) の電源を入れます。
2. 親器の各ボタンを長押しして学習モードにします。
 - ・ CA-360J → TEST ボタン
 - ・ CA-PX → LEARN ボタン
 - ・ CA-RX → RESET/RECALL と SOS ボタンの両方
3. CA-CX セルフォンセンサの側面の LEARN ボタンを 6～10 秒長押しします。
(RINGER が LO または HI の場合、CA-360J、CA-PX または CA-RX のビープ音が 2 回なります)

参考：ペアリングすることによってドアセンサ・ドアベルの無線を受信します

携帯機器 (ガラケー・スマホ・タブレット) が振動設定の場合

1. 携帯機器を CA-CX に置きます (着信音は有・無共に可)。
2. 携帯機器が振動すると CA-CX のランプが点灯し、RINGER が LO または HI の場合、着信音がなります。
3. RESET ボタンを押すと通知は止まります。
4. RESET ボタンを押さない場合、ランプは点灯し続けます。
※確実に着信を感知するために、振動時間は 3 秒以上連続するように設定してください。

既存のバイブレーション設定で反応しない場合は以下の設定を変更してください。

iPhone

1. 3秒振動して1秒停止のパターンを作成してください

作成方法：設定→サウンド→新着メール→バイブレーション
→新規バイブレーションを作成→名前をつけて保存

2. 新しく作成した振動パターンを初期設定に選んでください

設定方法：設定→サウンド→新着メール→バイブレーション
→1で保存した振動パターン

Android

1. 株式会社自立コムホームページ www.jiritsu.com の CA-CX のページ、または PLAY ストアより振動パターン設定用アプリ Jiritsu_Vib をインストールしてください。

2. Jiritsu_Vib を開いて3つの振動パターンからお好みの振動パターンを選んでください。

3. 設定方法の詳細は、自立コムホームページまたは Jiritsu_Vib のヘルプを参照してください。


固定電話の場合

1. 電話線を分岐して、1本はお使いの電話機の電話線接続口、もう1本は CA-CX の背部にある電話線接続口に接続します。
2. 固定電話に着信があると2つのランプが点灯し、RINGER が LO または HI の場合、着信音がなります。
3. 電話に出るまたは電話が切れた場合、及び留守電に切り替わった場合には通知は止まります。
4. 着信があったことを知らせるランプは呼び出しの終了と共に止まります。

USB 接続でお使いのスマートフォンを充電する

図のように、お使いのスマートフォンの USB 充電コードを CA-CX の USB 接続口へ接続すればスマートフォンやタブレット端末を充電することができます。
(AC アダプタを接続する必要があります)

USB 充電ケーブル
(携帯端末に付属)

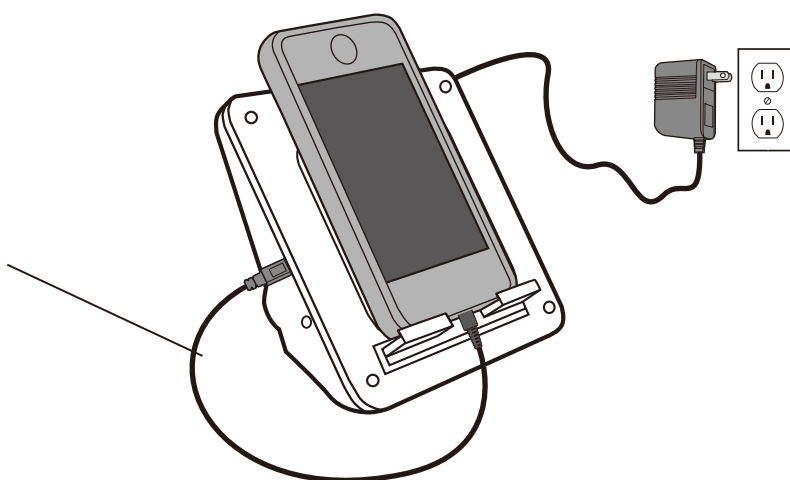

携帯機器が音声着信のみ、または台に乗らない場合

カール接続コードを利用します。


電話・メール・SMS・VoIP(Line・Skype・FaceTime など)の着信振動に反応しづらい場合やタブレットをご使用の場合も同様です。

※着信音をイヤホン出力に設定し音量を十分あげてください。

イヤホン出力の設定方法はお使いの携帯機器によります。

出力先が Bluetooth イヤホンなどになっていると反応しません。

カール接続コード

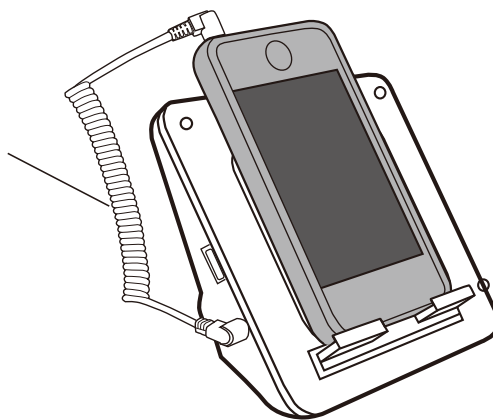

1. 図のようにカール接続コードの小型接続プラグ (2.5mm) のついた方を「SMS DETECT」接続口へ接続して、少し大きめの接続プラグ (3.5mm) を携帯端末のイヤホン接続口に接続します。
2. 着信を感知すると点灯し、RINGER が LO または HI の場合着信音になります。
3. RESET ボタンを押すと通知は止まります。
4. RESET ボタンを押さない場合、ランプは点灯し続けます。

着信があったことを知らせるランプ表示について

CA-CX は携帯機器に電話やメール着信があったことを知らせるランプ表示機能が工場出荷時に設定されています。

この着信があったことを知らせるランプ表示機能が設定されていると、電話やメール着信があったことを点灯し続けることでお知らせします。

1. この機能を解除するには、RESET ボタンと LEARN ボタンを同時に 3 秒間長押しします。

CA-CX のブザーが短く 3 回なれば解除が完了します (RINGER が OFF の場合はなりません)。

2. 再度この機能を設定するには、1 の手順を繰り返して、ブザーが 1 回なれば設定が完了します (RINGER が OFF の場合はなりません)。

●クリーニング

1. コンセントから AC アダプタを抜いてください。
乾いた柔らかい布で製品を優しく拭いてください。
溶剤や化学薬品は使用しないでください。
またアルコール、アンモニアや研磨剤の含まれたクリーナーも使用しないでください。

●トラブルシューティング

CA-CX が反応しない

コール接続コードで接続している場合

1. 着信音をイヤホン出力にしていることを確認してください。
2. 着信時間の長さが 3 秒以上連続するように設定してください。
3. コール接続コードが CA-CX と携帯機器のイヤホン接続口に正しく接続されていることを確認してください。

振動で感知させる場合

1. 携帯機器の振動を長い振動パターンに設定してください。
2. 携帯機器が CA-CX の適切な位置に置いてあることを確認してください。

●仕様・技術情報

- ・ 固定電話着信信号 : 40vrms,20-65Hz
- ・ USB 充電出力 : 最大 5VDC650mA
(AC アダプタ使用時のみ)
- ・ 入力電圧 : 9VDC 1000mA
- ・ サイズ : 約 116mm × 85mm × 90mm
(幅 × 奥行 × 高さ)
- ・ 重量 : 本体 (電池除く) 約 165g
本体 + アダプタ 約 260g
- ・ バックアップ電池 : 単三アルカリ 4 個 (別売)
- ・ 電池寿命 : 10 ヶ月 (使用状況による)

※商品の仕様は予告なく変更される場合がございます。



株式会社自立コム

〒150-0044 東京都渋谷区円山町 28-4 大場ビル 5F
5F 代表 TEL. 03-3476-2160 FAX. 03-3476-2425
6F 修理・デモ器 TEL. 03-3476-2175 FAX. 03-3476-2435